

Solvent Recycler **SR-2000N型**

CA-1115A

●表示の価格には消費税は含まれておりません。

Point!

清潔で使いやすいデザイン

還流部は手動式三方コック




還流比の調節は手動式の三方コックで行ないます。試料の種類、還流条件、混合比などに応じて調整ができます。

ガラス製ラシヒリング




両端研磨加工された精度のよいガラス製ラシヒリング外径 5×4 mmが充填され段効果を高めます。ラシヒリングは取出し、洗浄することができます。ガラスカラム管内の気液接触の状態を明確に観察できます。

試料を均一に加熱

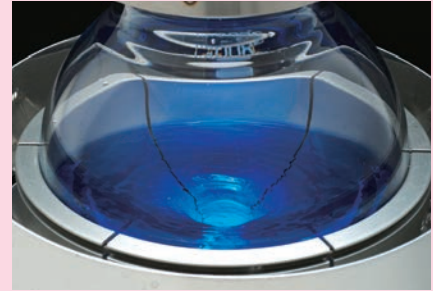


マグネチックスターラーを回転させることで試料の蒸発速度を増加させ、均一に混合できるので突沸が軽減できます。

フラスコにフィットするアルミブロック

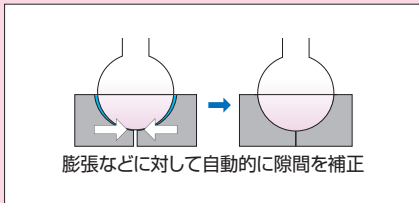


フラスコが熱により膨張・収縮すると、それに合わせてアルミブロックがフィットする構造になっています。加熱時の膨張・収縮によるフラスコの破損がなく、常に安定した伝熱性能を保ちます。

均一で安全な加熱

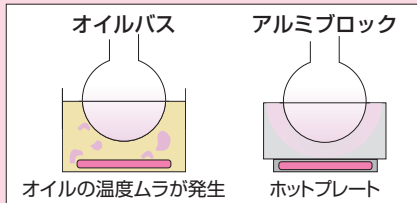

ブロックはアルミ合金製で、ブロック全体への熱伝達がよく、オイルバスにありがちな高温のオイルの滞留(ホットスポット)を防止し、均一で安全な加熱を行ないます。


オイルバスによる危険性を解消

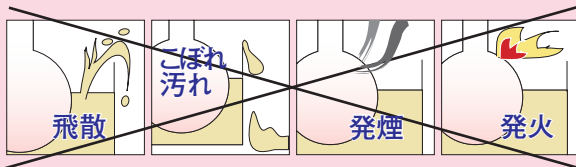

オイルバスは高温になったオイルのこぼれ・飛散・発煙・発火、マントルヒータはフラスコ破損時に液が電熱線に引火するなどの危険性がありました。オイルを使用しないので反応を安全に、きれいに、短時間でこなうことができます。

データ

■メタノール・水の蒸留

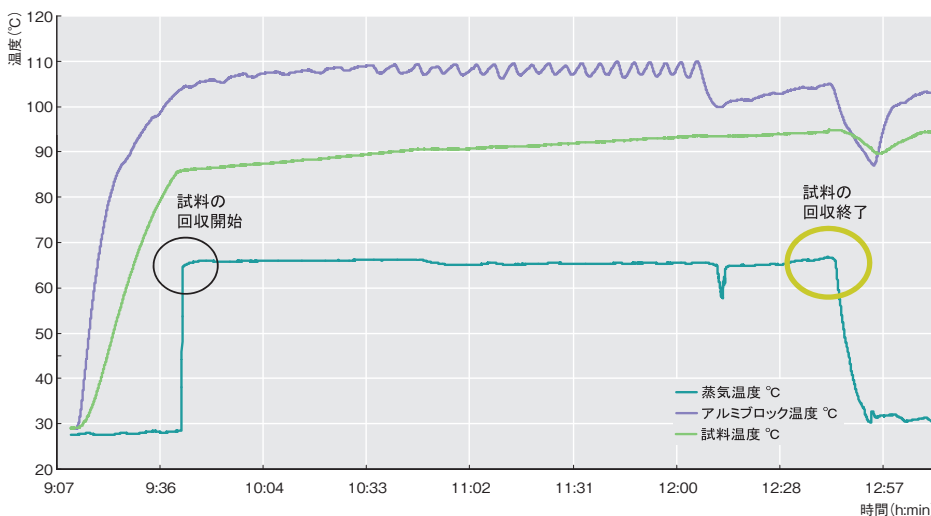

■再生例

メタノールと水の分離

市水	1077.50g
メタノール	1077.60g
メタノール濃度	50.00wt%
回収メタノール	1009.00g
試料フラスコ残り	1085.26g
回収メタノール濃度	99wt%
試料フラスコ残りの濃度	0~1wt%

50wt%メタノールを蒸留して99wt%のメタノール1009gを回収。
還流比(還流:回収) 2:1 所要時間:3時間

ヘキサンとトルエン混合液の分離

ヘキサン	511.43g
トルエン	510.87g
ヘキサン濃度	50.00wt%
回収ヘキサン	471.02g
試料フラスコ残り	504.34g
回収ヘキサン濃度	99wt%
試料フラスコヘキサン濃度	0~1wt%

50wt%ヘキサン 50wt%トルエンの2成分系混合溶液を蒸留して471gのヘキサン99%を回収。

合成装置	1
電気乾燥炉	2
恒温器	3
純化装置	4
低温恒温槽	5
循環・低温装置	6
冷却・ラップ装置	7
濃縮装置	8
減圧装置	9
凍結・乾燥・噴霧機	10
振盪機	11
攪拌機	12
送液ポンプ	13
クロマトグラフ	14
減菌装置	15
研究補助機器	16
外寸法図	17